

Omnican® Lance soft

Sterile Einmallanzette
zur Blutzuckermessung



Kompatibel mit Stechhilfen von

B. Braun	Omnilance®
Abbott	EasyTouch, Freestyle, Freestyle Lite
Bayer	Microlet, Microlet 2
Becton Dickinson	BD Optimus
LifeScan	One Touch UltraSoft
Menarini	Glucosject Dual
Owen Mumford	Autolet Impression
Sanofi Aventis	BGStar
Ypsomed	Pura

Die aufgeführten Marken sind Eigentum der genannten Unternehmen.

Größe	Stück/Packung	REF	PZN
28G	200	9167536E	07275421
30G	200	9167510E	09692502

Fakten Omnican® Lance soft Lanzetten

Lanzettentyp	Sterile Einmallanzette
Ausführungen	28G = ø 0,36 mm 30G = ø 0,30 mm gemäß DIN EN ISO 9626
Verwendungszweck	Kapillarblutentnahme zur Blutzuckermessung
Einstichtiefe	Mit der Omnilance®-Stechhilfe: einstellbar in 5 verschiedenen Einstichtiefen (0,3 mm Schritte)
Anwendungs- empfehlung	Steril, nur zur einmaligen Ver- wendung. Verwenden Sie immer eine neue Lanzette, und wechseln Sie die Einstichstelle, um eine Probe zu entnehmen. Die Bildung von Hornhaut wird so minimiert. Die Lanzette wird stumpf und unsteril, wenn sie mehrfach ver- wendet wird.
Entsorgung	Entsorgen Sie die gebrauchte Lanzette immer ordnungsgemäß, um Verletzungen oder Kontami- nation anderer zu vermeiden.
Sterilität	Sterilität für 5 Jahre gemäß ISO 11137:1995

B. Braun Melsungen AG | OPM | 34209 Melsungen
Deutschland | Tel (0 56 61) 71-33 99
Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.diabetes.bbraun.de

ST.03.03.13/1 Nr. 9992100 Stand: 03/2013



DiabetesCare

NEU: 30G
> 30,6 % kleinere Einstichfläche
(im Vergleich zu 28G)

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Omnican® Lance soft

Sanfte Blutentnahme

Omnican® Lance soft ist eine mit Silikonöl beschichtete Lanzette, die zusammen mit Stechhilfen zur Blutzuckermessung verwendet wird. Die feine Nadel mit dem 3-Facetten-Schliff sorgt für einen ausreichenden und idealen Blutfluss bei minimalem Schmerzempfinden.

Omnican® Lance soft ist ein steriler Einmalartikel. Verwenden Sie daher bei jeder Punktion eine neue Lanzette zur Blutzuckermessung, für eine möglichst schonende Blutentnahme!

Blutentnahme mit Omnican® Lance soft Lanzetten und Omnilance® Stechhilfen:

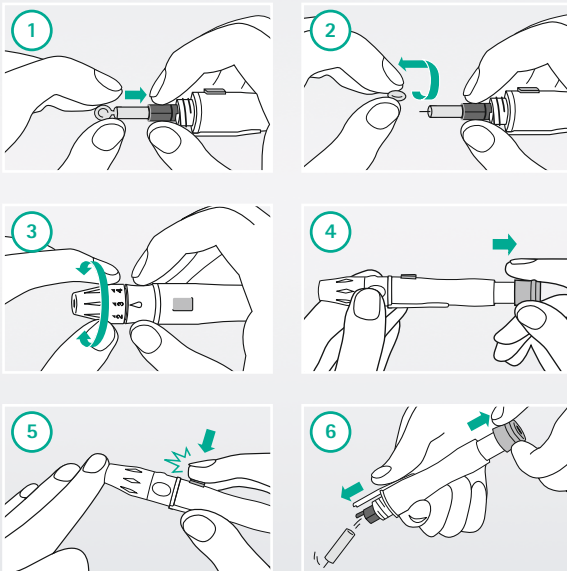


Nach Gebrauch in geeignetem Behälter entsorgen!

Schutzkappe

Die Lanzette bleibt steril, solange die Schutzkappe nicht entfernt wurde.

Lanzettenkörper

Das Rippendesign mit Standardabmessungen des Lanzettenkörpers bietet Kompatibilität mit verschiedenen Stechhilfen.

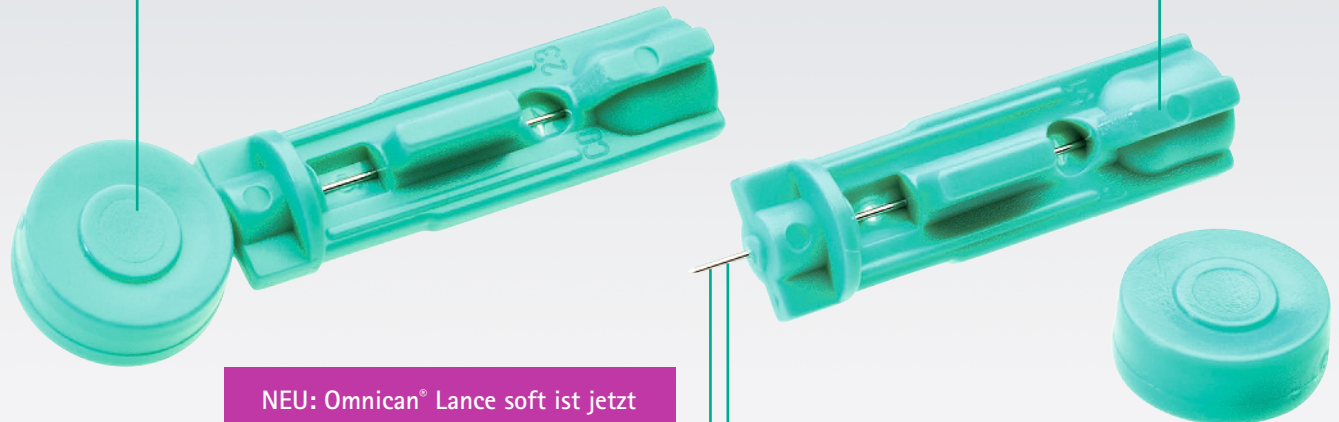

NEU: Omnican® Lance soft ist jetzt mit Silikonöl beschichtet, um eine noch sanftere Punktion zu ermöglichen

Silikonöl-beschichteter 3-Facetten-Schliff

Sorgt für einen sanften Einstich mit maximalem Komfort und optimalem Blutfluss.



28G- und 30G-Lanzetten

Omnican® Lance soft ist erhältlich in 28G (ø 0,36 mm) und **NEU** 30G (ø 0,30 mm). Ein höherer Gauge-Wert bedeutet eine kleinere Einstichfläche. Wählen Sie die Nadel, die am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.