

ON-Q® PainBuster®


Weniger Schmerzen nach der Operation und schnellere Heilung



Schmerztherapie

ON-Q® PainBuster®

Weniger Schmerzen nach der Operation und schnellere Heilung

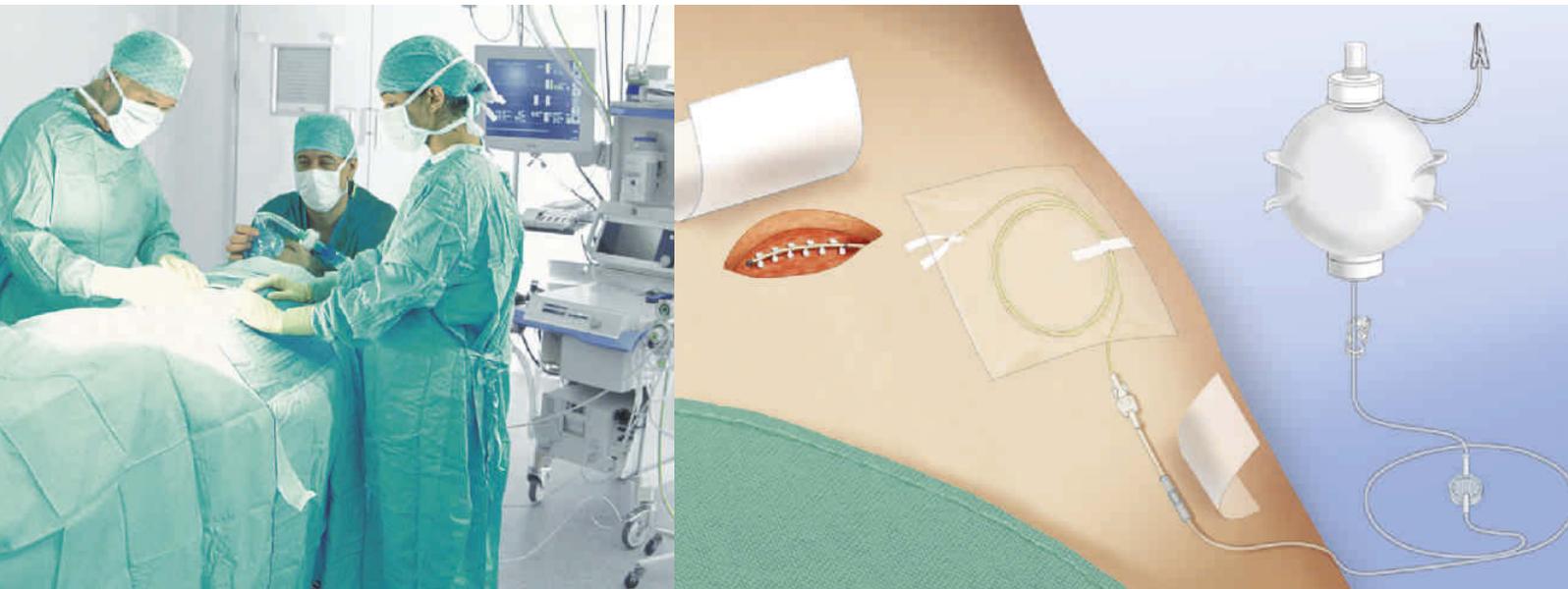

Mit ON-Q® PainBuster® definieren Sie Schmerztherapie neu

Kontinuierliche Wundinfusion ist eine Technik zur postoperativen Schmerzbehandlung mit deren Hilfe das Lokalanästhetikum über eine spezielles Kathetersystem in die Operationswunde gelangt und so den postoperativen Schmerz reduziert

PainBuster® bietet Ihnen

- schnellere Wiederherstellung der Mobilität¹
- verringerter Opiatbedarf¹ und damit weniger Nebenwirkungen wie Atemdepression, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Darmträgheit¹
- bewährtes Verfahren – Anwendung in einer Vielzahl von Operationen¹
- hohe Patientenzufriedenheit von über 90 %¹
- Verkürzung von Krankenhausaufhalten bzw. Intensivpflege-dauer bis zu 3 Tagen¹
- Senkung der Behandlungskosten um bis zu 30 %²

Anwendungsvorteile


- Verkürzte Krankenhausverweil-dauer¹
- Deutlich reduzierter Opiatbedarf¹
- Einfaches System – kein Einsatz von Elektronik, keine Wartung
- Senkung der Behandlungskosten²



¹ Liu SS, Richman JM, Thirby RC, Wu CL. Efficacy of Continuous Wound Catheters Delivering Local Anaesthetic for Postoperative Analgesia: A Quantitative and Qualitative Systematic Review of Randomized Controlled Trials. JACS 2006; 203(6): 914-932.

² Zimberg S, Reducing Pain and Costs with Innovative Postoperative Pain Management, Managed Care Quarterly 2003; 11(1): 34-36 .

ON-Q® PainBuster® – Für besseres Outcome Ihrer Patienten

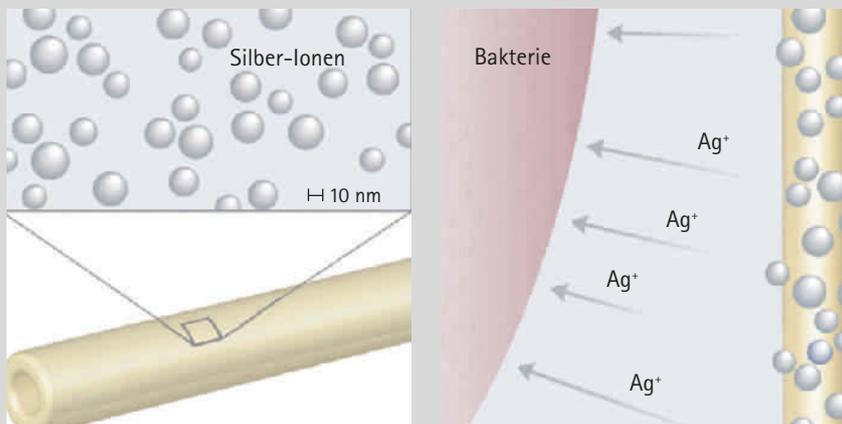


Silber-Ionen (Ag^+) aus SilvaGard® greifen in den Energiestoffwechsel von Bakterienzellen ein und hemmen deren Wachstum.



Merkmale und Vorteile des Soaker Katheters™

- Einzigartiges Katheterdesign mit mehreren seitlichen Öffnungen über die gesamte Infusionslänge zur gleichmäßigen Infusion des Lokalanästhetikums
- große Auswahl an Kathetern mit unterschiedlichen Infusionslängen
- Einführnadel und Peel-off Schleuse für eine erleichterte Katheteranwendung
- Längenmarkierung für eine vereinfachte Katheterpositionierung
- Doppelkathetersysteme für größere Infusionsbereiche
- SilverSoaker™: Katheter mit beidseitiger Silber-Ionen-Beschichtung zur Hemmung des Bakterienwachstums

ON-Q® SilverSoaker™
Antimikrobieller Katheter

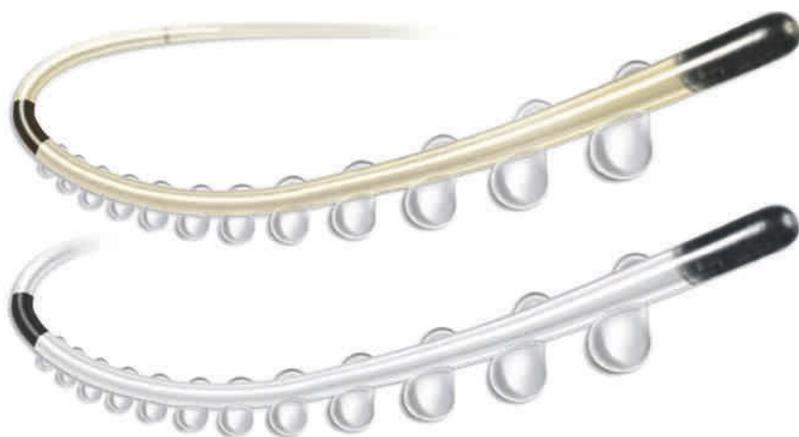

ON-Q® Soaker Catheter™

Produktspezifikationen

PainBuster® Systeme

Abgabedauer Tage ³	Pumpen- füllvolumen (ml)	Durchfluss- rate (ml/h)	2,5 cm Infusionslänge		6,5 cm Infusionslänge		12,5 cm Infusionslänge		25 cm Infusionslänge	
			Soaker Katheter™	Silver Soaker™	Soaker Katheter™	Silver Soaker™	Soaker Katheter™	Silver Soaker™	Soaker Katheter™	Silver Soaker™
4	100	1	5001790	-	-	-	-	-	-	-
2	100	2	5001489	-	5001258	5001656	5001473	-	-	-
5	270	2	-	-	5001259	5001793	5001474	-	-	-
2 ¼	270	5	5001490	-	5001260	5001657	5001302	5001659	-	-
3	270	4 (2x2)	-	-	5001275	5001658	5001475	5001660	5001679	5001796
3 ½	400	5	-	-	5001825	-	5001456	5001794	5001680	5001797
2	400	10	-	-	5001823	-	5001457	-	-	-
4	400	4 (2x2)	-	-	5001455	-	5001458	5001795	-	-

³Die Abgabedauer ist ein Näherungswert und basiert auf den Nennwerten. Die vollständigen Angaben zum Produkt sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Alle Packungen beinhalten 5 PainBuster® Systeme.

Ein System enthält:

- Infusionspumpe
- Soaker-Katheter™ 61 cm, 19G
- 60 ml-Spritze zum Befüllen
- E-Clip oder Tragetasche
- 17G Einführnadel und Peel-off-Schleuse
- 5 ml-Spritze für die Katheter-Entlüftung
- Etikett für Arzneimittelkennzeichnung
- Abziehetiketten
- Patienteninformation
- Gebrauchsanweisung
- Befüllungshilfe (nur bei 400 ml-Modellen)

Einzelkathetersets ⁴	Art.-Nr.
ON-Q® SilverSoaker™ 2,5 cm (1")	5001710
ON-Q® SilverSoaker™ 6,5 cm (2,5")	5001708
ON-Q® SilverSoaker™ 12,5 cm (5")	5001709
ON-Q® SilverSoaker™ 19,1 cm (7,5")	5001818
ON-Q® SilverSoaker™ 25 cm (10")	5001711

⁴ Enthält: Silver Soaker Katheter 19G, 17G Einführnadel mit Peel-off-Schleuse, Tegaderm, SteriStrips, Gebrauchsanweisung, Packungsbeilage zum antimikrobiellen Katheterset, 5 ml Spritze

PainBuster® Zubehör

PainBuster®-Zubehör	Art.-Nr.	Einmal-Tunneler ⁵	Art.-Nr.
Soaker Einführnadel 3,25" (8,3 cm)	5001402	Einmal-Tunneler 3,25" (8,25 cm), 17G	5001685
Soaker Einführnadel 6" (15,2 cm)	5001430	Einmal-Tunneler 5" (12,5 cm), 17G	5001687
Soaker Einführnadel 8" (20,3 cm)	5001429	Einmal-Tunneler 8" (20,3 cm), 11G	5001763
Befüllungshilfe	5001439	Einmal-Tunneler 8" (20,3 cm), 17G	5001689
		Einmal-Tunneler 12" (30,5 cm), 11G	5001765
		Einmal-Tunneler 12" (30,5 cm), 16G	5001761

⁵ Enthält: Tunneler und zwei Peel-off-Schleusen