


Optilene® Mesh Elastic

Netz zur RepARATION von Narben- und Leistenhernien

Das großporige, elastische und materialreduzierte Herniennetz aus Polypropylen

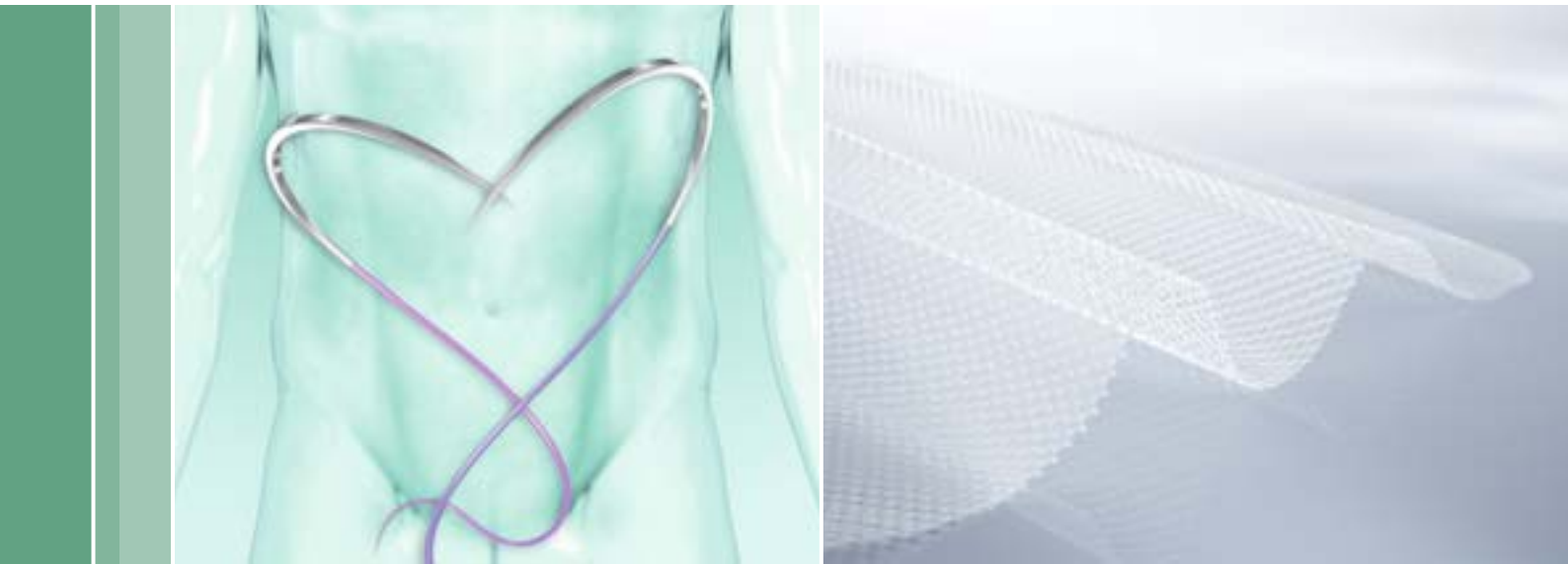

Hernia Repair

Optilene® Mesh Elastic

Netz zur RepARATION von Narben- und Leistenhernien

Aufgrund seiner Rundumelastizität passt sich Optilene® Mesh Elastic sehr gut an die Bauchdeckenphysiologie des Patienten an. Die neue, großporige Wabenstruktur unterstützt sowohl den Heilungsprozess als auch die Entwicklung eines elastischen Narbennetzes. Optilene® Mesh Elastic eignet sich daher hervorragend zur RepARATION von Narbenhernien und kann auch zur Versorgung von Leistenhernien eingesetzt werden.

großporig & elastisch & materialreduziert

➤ Großporige Wabenstruktur

unterstützt die Einheilung und Entwicklung eines elastischen Narbennetzes

➤ Rundum Elastizität

für exzellenten Patientenkomfort

➤ Materialreduziert

für eine geringere Fremdkörperreaktion

➤ Für offene Techniken in der Narbenhernienchirurgie

- Onlay
- Sublay

➤ Für offene und laparoskopische Techniken in der Leistenhernienchirurgie

- Lichtenstein
- TEP
- TAPP

großporige Wabenstruktur



Die großporige Wabenstruktur unterstützt die Einheilung und Entwicklung eines elastischen Narbennetzes für den Erhalt der Bauchwandmobilität.

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Größe	Verpackungsinhalt
1064900	30 x 30 cm	5 Stück
1064910	15 x 15 cm	5 Stück
1064920	10 x 15 cm	5 Stück
1064930	7,5 x 15 cm	5 Stück
1064940	20 x 30 cm	5 Stück




Optilene® Mesh Elastic

Netz zur RepARATION von Narben- und Leistenhernien

Elastizitätsvergleich

Längsdistensionswerte bei 16 N (gemäß DIN EN ISO 13934-1)

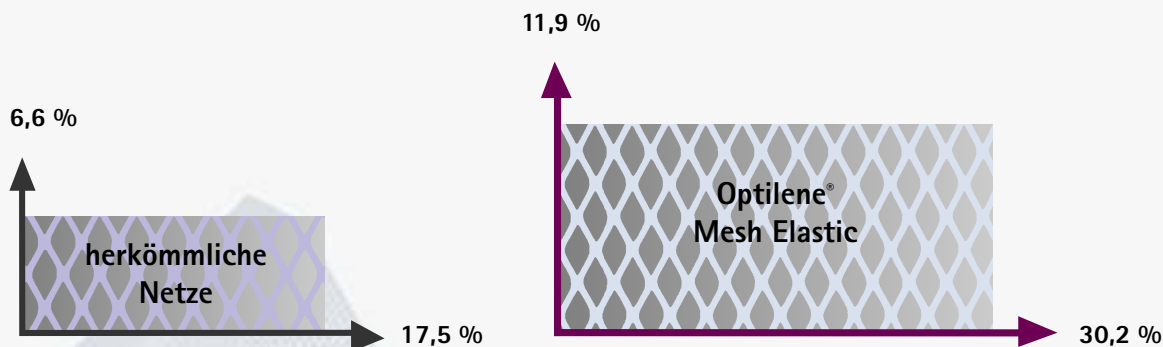

Eine Elastizität von ca. 20 – 30 % ist notwendig, um die Einschränkung der Bauchwandmobilität zu verringern¹

¹ROSCH R, ET AL. Welche Anforderungen sollte ein ideales Netz erfüllen?
Chir Gastroenterol 2003; 19 (suppl 2): 7 – 11

Produkteigenschaften

Material	Monofiles Polypropylen
Konstruktion	Gestrickt
Flächengewicht	48 g/m ²
Porengröße	3,6 x 2,8 mm
Stärke	0,55 mm
Indikationen	Leistenhernie Narbenhernie (Onlay-/Sublay-Technik)
Kontraindikationen	Optilene® Mesh Elastic darf nicht in kontaminiertes und infektiöses Gewebe eingebracht oder Kindern in der Wachstumsphase implantiert werden
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke Aesculap und die Produktmarke Optilene sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.