

Aesculap® AdTec® bipolar

LA (R)EVOLUCION AZUL



Aesculap Endoscopic Technology

Aesculap® AdTec® bipolar

LA (R)EVOLUCION AZUL



Desde su lanzamiento, la línea de producto **AdTec bipolar** ha gozado de un grandes éxitos entre los usuarios. Y no es sorpresa que la mezcla de seguridad, ergonomía y rentabilidad convierten la línea en un verdadero ganador.


AdTec bipolar combina la ablación eléctrica bipolar con un nuevo y anteriormente desconocido nivel de sensibilidad, lo cual hace estos instrumentos más seguros que nunca, para ambos, usted y sus pacientes.

Este producto altamente innovador ha sido desarrollado mediante el uso de nuevos materiales – cerámica, acero y plástico – en su combinación y aplicando nuevas tecnologías de producción.

¡Pero siempre es posible mejorarse, incluso si el producto ya es excelente! Por lo tanto, Aesculap ha refinado sistemáticamente estos instrumentos, haciéndolos más eficaces en el uso diario – y esta generación de instrumentos está disponible ahora – **Evolución**

La estabilidad de las piezas de boca ha mejorado y el corte de las tijeras es más preciso, lo que aumenta la vida útil de los instrumentos. Adicionalmente, se ha ampliado la gama con la inclusión de nuevos tipos de bocas – lo cual significa más flexibilidad. Los instrumentos ahora también son más fácilmente reconocibles a través del color **azul**: cerámica azul dentro de la boca, aislamiento azul en la barra de tracción, marcación azul en los mangos.

Por que no se une a la **revolución AdTec bipolar** – y experimente estos fascinantes instrumentos endoscópicos bipolares por usted mismo!

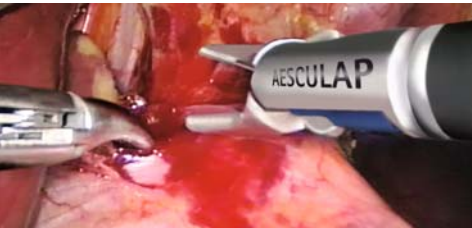

CONCEPTO

AdTec bipolar representa una tecnología de instrumentos bipolares totalmente nueva. Los materiales más modernos significan seguridad, alta sensación táctil, aplicación universal y alta calidad.

Patentes: DE 196 08 716
US 5 853 412

TACTILIDAD

Alta sensación táctil

La sensación exacta del tacto es transmitida de vuelta al usuario, dejándolo decidir que tan firme quiere sujetar el tejido.

SEGURIDAD

Seguridad hasta la punta

- El diseño garantiza excelentes resultados de coagulación.
- Cierre seguro incluso de grandes vasos arteriales.
- Ningún "efecto de deslizamiento" al agarrar y preparar.
- Ningún riesgo de fugas de corriente gracias a la tecnología bipolar.
- Agarre, corte y disección precisa de las estructuras delicadas.

UNIVERSAL

Diseño modular

- Concepto sencillo, manejo fácil: con las mismas características que los instrumentos monopolares.

Uso universal

- Para utilización en todas las indicaciones laparoscópicas de cirugía ginecológica, urológica, general y vascular.
- Para cualquier tejido y estructuras delicadas.

Economía



La preparación, cuidado y esterilización de la nueva gama es tan conveniente, rápida y segura como con los instrumentos monopolares.

Los productos **AdTec bipolar** son reutilizables y por lo tanto muy rentables. El diseño modular permite la sustitución económica de componentes individuales si es necesario.



$1/1$



$1/1$



$1/1$



$1/1$



$1/1$



$1/1$



		Instrumento completo	Inserto de boca	Tubo exterior aislado	Mango
Tijeras METZENBAUM	Longitud del vástago 220 mm	PM409R	PM439R	PM970R	PM450R
	Longitud del vástago 310 mm	PM400R	PM430R	PM973R	PM450R
	Longitud del vástago 420 mm	PM404R	PM434R	PM981R	PM450R
Tijeras METZENBAUM MINI	Longitud del vástago 220 mm	PM414R	PM444R	PM970R	PM450R
	Longitud del vástago 310 mm	PM407R	PM437R	PM973R	PM450R
Pinza de sujeción MARYLAND	Longitud del vástago 220 mm	PM410R	PM440R	PM970R	PM450R
	Longitud del vástago 310 mm	PM401R	PM431R	PM973R	PM450R
	Longitud del vástago 420 mm	PM405R	PM435R	PM981R	PM450R
Pinza de sujeción MARYLAND fenestrada	Longitud del vástago 220 mm	PM413R	PM443R	PM970R	PM450R
	Longitud del vástago 310 mm	PM408R	PM438R	PM973R	PM450R
	Longitud del vástago 420 mm	PM415R	PM445R	PM981R	PM450R
Pinza de sujeción MICRO	Longitud de trabajo 310 mm	PM402R	PM432R	PM973R	PM450R
Pinza de sujeción MACRO	Longitud de trabajo 220 mm	PM412R	PM442R	PM970R	PM450R
	Longitud de trabajo 310 mm	PM403R	PM433R	PM973R	PM450R
	Longitud de trabajo 420 mm	PM406R	PM436R	PM981R	PM450R
	Protector para mandíbula	PM433220			

Cables bipolares con conexión Aesculap®

Lado del equipo	Lado del instrumento	No. art.	Distancia pines	Descripción
		GK342	ø 8 mm/ ø 4 mm	longitud 4 m, adecuado para generadores como: ERBE, Storz
		GN140	ø 5 mm/ ø 2 mm	pin redondo, longitud 4 m, adecuado para generadores como: Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin, Wolf
		GK280	22 mm	longitud 4 m, adecuado para generadores como: Dolly, EMC, ERBE-International
		GK281	28.6 mm	longitud 4 m, adecuado para generadores como: Aesculap, BOWA, EMC, Lamidey, Söring, Valleylab
		GK282	38 mm	longitud 4 m, adecuado para generadores como: Codman CMC II, CMC III
	 	GK290SU 	22 mm	longitud 3.7 m, adecuado para generadores como: Dolly, EMC, ERBE-International
	 	GK291SU 	28.6 mm	longitud 3.7 m, adecuado para generadores como: Aesculap, BOWA, EMC, Lamidey, Söring, Valleylab
	 	GK292SU 	38 mm	longitud 3.7 m, adecuado para generadores como: Codman CMC II, CMC III
		GN088	Interruptor manual para instrumentos AdTec® bipolar, para uso con el generador de Alta Frecuencia Nelson Deluxe (GN640).	

Para cables y adaptadores adicionales, por favor, consulte nuestro folleto C30481.

STERILIT

JG600

AESCULAP Aceite lubricante en spray de 300ml (inocuo para la capa de ozono), para mantenimiento de instrumentos previo a la esterilización. Biocompatible según DAB y § 31 LMBG (Farmacopea Alemana).

STERILIT

JG598

AESCULAP Aceite de instrumental para lubricación de cremalleras, cajas, etc. previa a la esterilización. Biocompatible según DAB y § 31 LMBG (Farmacopea Alemana).



JG600

JG598




AdTec® single use

Instrumentos bipolares descartables

- Excelente calidad del corte
- Piezas de boca con aislamiento de cerámica
- Aislados hasta la punta

Todos los productos endoscópicos de Aesculap se encuentran en nuestra página web:

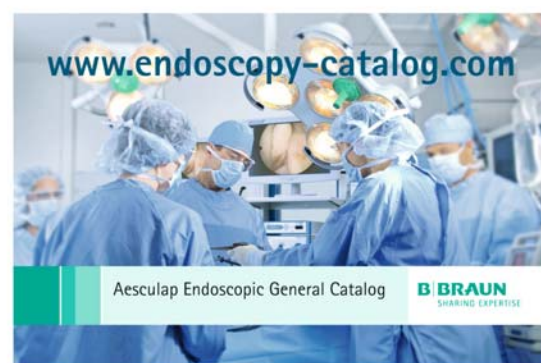

...a solo un click!

B. Braun Surgical SA | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Spain
Phone +34 93 5 86 62 00 | Fax +34 93 6 99 63 30 | www.bbraun.com

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

La marca de producto principal 'Aesculap' y las marcas de producto 'AdTec' y 'Sterilit' son marcas registradas de Aesculap AG.

Reservados todos los derechos. Modificaciones técnicas son posibles. Este folleto debe ser usado exclusivamente para ofrecer, comprar y vender nuestros productos. Ninguna parte puede ser copiada o reproducida en cualquier forma. En caso de abuso nos reservamos el derecho de revocar nuestros catálogos y listas de precios y adoptar acciones legales.