


Expansion Chambers CCV/CCA for Dialog iQ Machines

Exchange the following components according to the exploded drawing

- Expansion chamber CCV, including valve VCCV
 - Expansion chamber CCA, including valve VCCA
1. Disconnect respective tubing from tubing connector A1/B1.
 2. Disconnect respective electrical connection from A2/B2 at VCCV/VCCA.
 3. Disassemble CCV/CCA with 2 screws A/B.
 4. Assemble new CCV/CCA with screws A/B.
 5. Connect respective electrical connection to A2/B2 at VCCV/VCCA.
 6. Cut app. 5 mm of the tubing A1/B1 and connect tubing to VCCV/VCCA.
 7. Perform all tests and measures according to repair matrix.

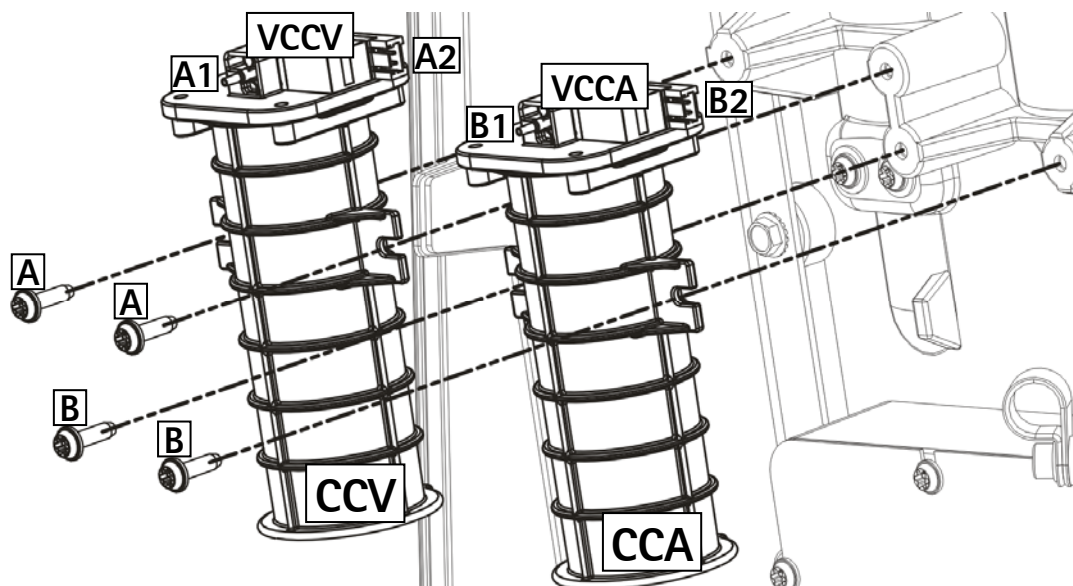

IL_2017_Dialog iQ_Expansion Chambers CCV-CCA.doc/pdf


Rev. 1.00.00 / August 2017

B. Braun Avitum AG

Expansion Chambers CCV/CCA for Dialog iQ Machines

Exchange the following components according to the exploded drawing

- Expansion chamber CCV, including valve VCCV
 - Expansion chamber CCA, including valve VCCA
1. Disconnect respective tubing from tubing connector A1/B1.
 2. Disconnect respective electrical connection from A2/B2 at VCCV/VCCA.
 3. Disassemble CCV/CCA with 2 screws A/B.
 4. Assemble new CCV/CCA with screws A/B.
 5. Connect respective electrical connection to A2/B2 at VCCV/VCCA.
 6. Cut app. 5 mm of the tubing A1/B1 and connect tubing to VCCV/VCCA.
 7. Perform all tests and measures according to repair matrix.

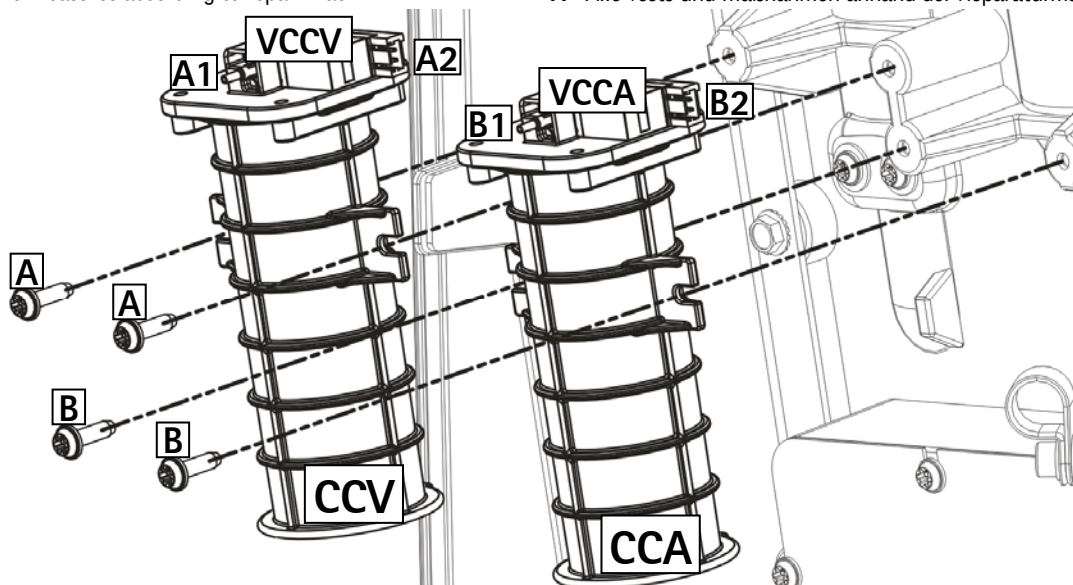

IL_2017_Dialog iQ_Expansion Chambers CCV-CCA.doc/pdf

Rev. 1.00.00 / August 2017

B. Braun Avitum AG

Expansionskammern CCV/CCA für Dialog iQ Geräte

Folgende Komponenten anhand der Explosionszeichnung austauschen:

- Expansionskammer CCV, inklusive Ventil VCCV
 - Expansionskammer CCA, inklusive Ventil VCCA
1. Entsprechende Verschlauchung A1/B1 abziehen.
 2. Elektrische Verbindung A2/B2 an VCCV/VCCA abziehen.
 3. CCV/CCA mit 2 Schrauben A/B demontieren.
 4. Neue CCV/CCA austauschen und mit Schrauben A/B montieren.
 5. Elektrische Verbindung A2/B2 an CCV/CCA anschließen.
 6. Verschlauchung A1/B1 um ca. 5 mm kürzen und an CCV/CCA stecken.
 7. Alle Tests und Maßnahmen anhand der Reparaturmatrix durchführen.