

Technik mit Touch. Effizienz, die begeistert.




Intuitive Benutzeroberfläche

Selbsterklärende Navigation, die Schritt für Schritt durch die Therapieeingabe führt.



Alles auf einen Blick

Guter Überblick über wichtige Informationen, um schnell, angemessen und sicher reagieren zu können.

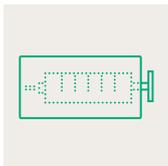

Spritzenstatus jederzeit sichtbar

Graphische Echtzeitdarstellung des aktuellen Füllvolumens der Spritze. Einem rechtzeitigen Spritzenwechsel und der Therapieplanung steht damit nichts im Wege.



Einfach durch Design

- Anwenderfreundliche und intuitive Bedienung.
- Anpassung an verschiedene Arbeitsabläufe möglich.
- Trägt zur **Reduzierung von Medikationsfehlern** bei.
- Gleiches Design, gleiche Benutzeroberfläche und Menüstruktur bei Space^{plus} Infusomat[®] und Space^{plus} Perfusor[®].
> **Verringert den Einweisungsaufwand** und das **Risiko von Handhabungsfehlern.**



Vielfältige Therapiemöglichkeiten mit passenden Einmalartikeln

Zum Beispiel:

- Standardtherapie ①
- Lichtgeschützte Therapie ②
- Transfusionstherapie
- Schmerztherapie ③
- Antibiotikatherapie
- Onkologische Therapie
- Enterale Ernährung ④



Space^{plus} Perfusor®



Spritzenpumpe

- Die **einzigartige Kolbenbremse** hilft Freeflow und Handhabungsfehler während des Spritzenwechsels zu verhindern.
- **Vollautomatischer Antrieb**
- Volumenvorwahl: 0,01 ml – 9.999 ml
- Förderratenbereich: 0,01 ml/h ... 1.800 ml/h
- **Förderrateneinstellung:**
0,01 ml/h ... 99,99 ml/h in Schritten von 0,01 ml/h
100,0 ml/h ... 999,9 ml/h in Schritten von 0,1 ml/h
1.000 ml/h ... 1.800 ml/h in Schritten von 1 ml/h
- **Fördergenauigkeit von ± 2 %**
- Graphische Echtzeitdarstellung des Spritzenfüllvolumens
- Maße (BxHxT): ca. 255 mm x 70 mm x 170 mm
- Gewicht: 1,9 kg ohne Pumpenklemme

Space^{plus} Infusomat®



Volumetrische Infusionspumpe

- Verwendung mit Infusomat® Space Leitungen
- **Doppelt wirksamer Freeflow Schutz** durch geräte- und leitungsseitiger Anti-Freeflow-Klemmen
- Volumenvorwahl: 0,1 ml – 9.999 ml
- Förderratenbereich: 0,1 ml/h ... 1.200 ml/h
- **Förderrateneinstellung:**
0,1 ml/h ... 99,99 ml/h in Schritten von 0,01 ml/h
100,0 ml/h ... 999,9 ml/h in Schritten von 0,1 ml/h
1.000 ml/h ... 1.200 ml/h in Schritten von 1 ml/h
- **Fördergenauigkeit von ± 3 %**
- Maße (BxHxT): : ca. 215 mm x 70 mm x 170 mm
- Gewicht: 1,9 kg ohne Pumpenklemme

Eigenschaften

- Innovatives Design
- Modernes **Farb-Touch-Display**
- Integrierter **Tragegriff**
- Integriertes **Netzteil**
- Integriertes **WiFi Modul**
- Spritzwasserschutz **IP 44**
- Langlebiger **Li-Ion Akku**
- **Medikamentendatenbank** mit Anzeige DIVI-konformer Medikationskennzeichnung (Farbetikett)
- Verschiedene **Therapiemodi**
- Anwendung bei **Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen**
- Für die **intermittierende oder kontinuierlichen Verabreichung** von parenteralen und enteralen Lösungen
- Testung gemäß **DIN EN 60601-1-12**

Bestelldaten

Beschreibung	Art.-Nr.
Space ^{plus} Perfusor®	8719030
Space ^{plus} Infusomat®	8719050
Kaltgerätekabel für Space ^{plus} und compact ^{plus} , EU, 2,50 m	8717110
Space ^{plus} Pumpenklemme	8719165
Schnittstellenkabel Space ^{plus} , 12 Volt	871923112