

AESCULAP® Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine

Sehen. Spüren. Erleben.



AESCULAP® Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine

Sehen. Spüren. Erleben.



Alle Maße und technischen Daten in diesem Katalog sind Nennmaße, welche anerkannten fertigungsbedingten Toleranzen unterliegen und sind vorbehaltlich technischer Änderungen.

Eine Maschine, die Sie von der ersten Sekunde an begeistern wird.

Als einer der führenden Anbieter im Bereich Motorensysteme bietet AESCULAP® Lösungen für viele Indikationsgebiete.

Unsere Philosophie ist es, durchdachte Systeme zu entwickeln, die den Klinikalltag vereinfachen – für den Chirurgen während der Operation, für das OP-Team beim Handling und für die AEMP (ZSVA) bei der Wiederaufbereitung. Mit der Acculan® 4 Kleinen Bohrmaschine haben wir uns dieser Herausforderung neu gestellt.

Sie bekommen eine Maschine in die Hand, die Sie von der ersten Sekunde an begeistern wird. Schon beim Anfassen können Sie den Unterschied spüren:

- Die Maschine lässt sich durch ihre runde, ergonomische Form hervorragend führen.
- Sie liegt durch den im Griff integrierten Akku gut in der Hand.
- Das Gehäuse aus Titan besticht durch seine Eleganz.

Die Maschine orientiert sich insbesondere an den Belangen traumatologischer Eingriffe und Indikationen, die der kleinen Knochenchirurgie zugeordnet sind.

Erleben Sie es selbst


Die Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine ist eine leistungsstarke und einfach bedienbare Maschine, die Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Ergonomie in sich vereint.

Die Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine GA344 ist das Herzstück des neuen Systems.

Dank ihres leistungsstarken Motors bietet sie ein breites Anwendungsspektrum welches von der Kleinfragment-Osteosynthese bis hin zur aufgebohrten Marknagelung reicht. Dies wird ermöglicht durch eine Vielzahl an verfügbaren Aufsätzen.

AESCULAP® Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine

Sehen. Spüren. Erleben.

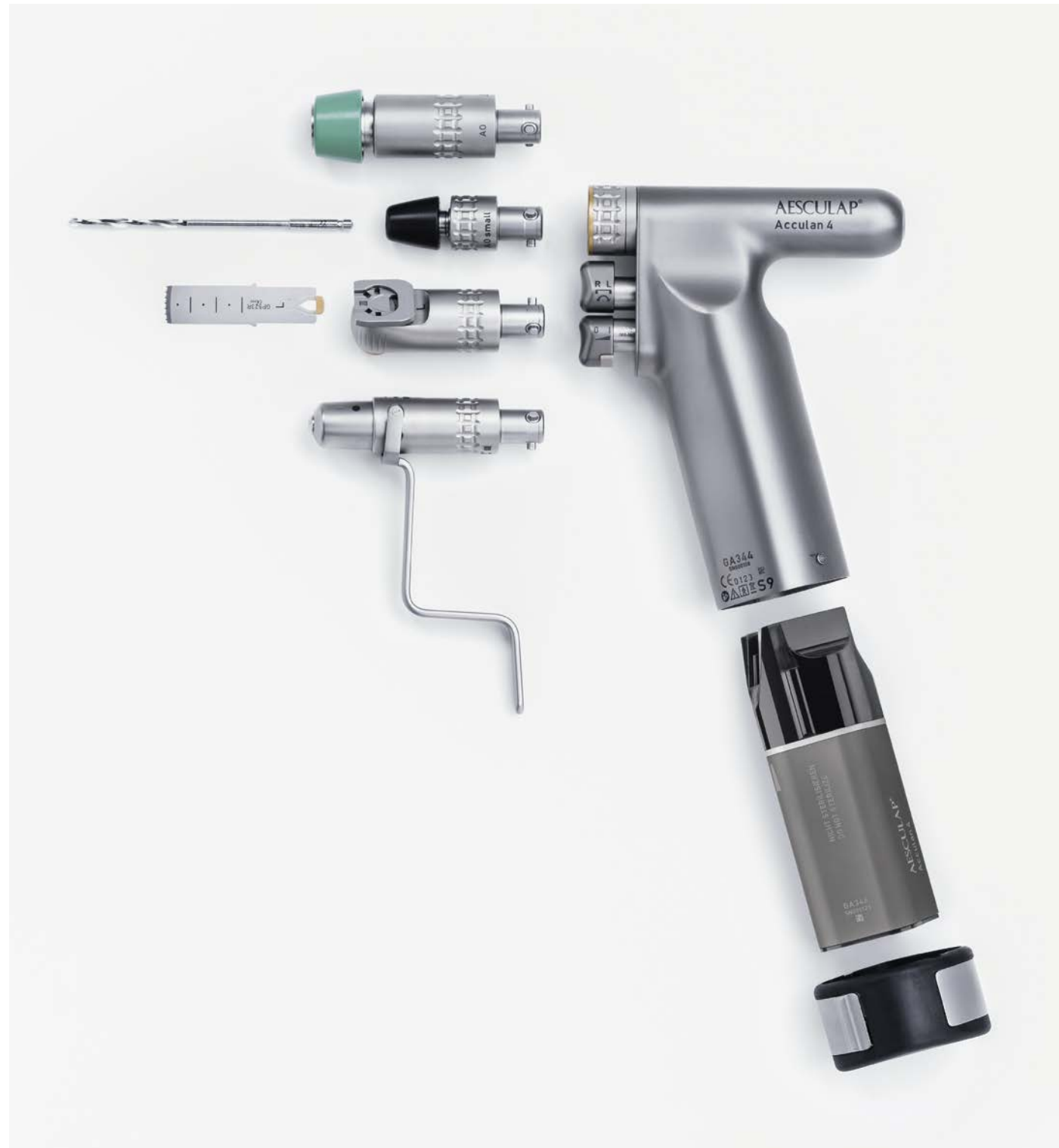

Die verschiedenen Aufsätze ermöglichen Ihnen einen flexiblen Einsatz des Systems.

Die Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine führt die Philosophie der Acculan® Familie konsequent fort:

Der Unterschied liegt im Detail

AESCULAP® war Pionier bei der Einführung eines unsterilen Akkus. Hierbei wird nicht nur die Sterilisation der temperaturempfindlichen Akkuzellen vermieden. Durch die Integration der kompletten Steuer elektronik in den Akku wird auch diese nicht der Belastung durch Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Lebensdauer und damit auch auf die Betriebskosten des Systems aus. Ein Konzept, das sich bereits seit Jahren bewährt hat. Durch die Möglichkeit des Akkuzellentauschs zum Festpreis und der Weiterverwendung von Elektronik und Gehäuse schonen Sie die Umwelt und Ihr Budget.

Maschinelle Aufbereitung

Dank des Titangehäuses und der separat erhältlichen ECCOS® Lagerung können Acculan® Maschinen maschinell mit alkalischen Reinigungsmedien aufbereitet werden. Durch unsere Spüladapter bieten wir Ihnen eine einfache Möglichkeit zur maschinellen Innenreinigung von Lumen.

Service-Stempel

Um sicherzustellen, dass Motorsysteme dauerhaft zuverlässig arbeiten, ist eine regelmäßige präventive Instandhaltung wichtig. Mit dem Service-Stempel auf der Maschine macht es Ihnen AESCULAP® einfach zu erkennen, wann die nächste präventive Instandhaltung erfolgen soll.

Aufsätze

Die verschiedenen Aufsätze für die Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine ermöglichen Ihnen einen flexiblen Einsatz des Systems ohne dabei Abstriche hinsichtlich Bedienkomfort und Leistung machen zu müssen.

- Durch die Getriebeaufsätze passt sich die Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine dem Einsatzbereich an – schnell zum präzisen Bohren und kraftvoll für das Markraumbohren.

- Kompatibel zu den gängigen Fräs- und Bohrwerkzeugen durch Aufsätze für AO-klein, AO-groß, Dental, Zimmer, Hudson und AESCULAP® Sechskant.

- Einfache Unterscheidbarkeit von Aufsätzen und deren Einsatzgebiet durch Farbcodierung der Entriegelungshülse:

Bohren = schwarz
Markraumbohren = grün
Schraubaufsatz = blau

- Ein Kirschner Draht Futter für alle gängigen Durchmesser.
- Sagittalsägeaufsatz für Sägearbeiten bis zu einer Sägeblattnutzlänge von 50 mm mit schlüsselloser Sägeblattkupplung.
- Adapter kompatibel mit dem röntgenstrahlendurchlässigen Winkelgetriebe der Firma Synthes 511.300.

AESCULAP® Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine

Systemüberblick

GA344	Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine (inkl. Steriltrichter GA678, Ölsprayadapter GB600880, Spickdrahtschutzhülse GA344244, Spüladapter GA344211)
GA346	Lithium-Ionen Akku kurz
GA675	Verschlussdeckel
GA320	Ladegerät
TE780	Netzkabel 1,5 m
TE730	Netzkabel 5,0 m
GB870R	Markraumbohraufsatz großes Dreibackenfutter (Ø 0,5 - 7,4 mm)
GB871R	Markraumbohraufsatz AO-groß
GB872R	Markraumbohraufsatz Hudson / Zimmer
GB878R	Adapter für Synthes röntgenstrahlendurchlässiges Winkelgetriebe 511.300
GB881R	Bohraufsatz großes Dreibackenfutter (Ø 0,5 - 7,4 mm)
GB882R	Bohraufsatz kleines Dreibackenfutter (Ø 0,5 - 4,0 mm)
GB884R	Bohraufsatz AO-klein
GB886R	Bohraufsatz AESCULAP® Sechskant
GB887R	Bohraufsatz Dentalschaft
GB891R	Sagittalsägeaufsatz (für Sägeblätter mit max. Nutzlänge von 50 mm)
GB894R	Spickdrahtaufsatz (Ø 0,6 - 3,2 mm)
GB257R	ECCOS® Set für Acculan® 4 Kleine Bohrmaschine und 5 Aufsätze
GB715R	ECCOS® Halterung für 1 Aufsatz
GB716R	ECCOS® Halterung für 3 Aufsätze
GB600	Sterilit® Ölspray 
TA011944	Reinigungsbürste



Sägeblätter

 sterile				
GP501R	15,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP502R	15,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP504R	20,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP505R	20,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP514R	25,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP515R	25,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP516R	25,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP518R	35,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP521R	35,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP522R	35,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP523R	35,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP524R	35,0 mm	20,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP535R	50,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,8 mm
GP536R	50,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	0,8 mm
GP537R	50,0 mm	20,0 mm	0,7 mm	0,9 mm
GP538R	50,0 mm	25,0 mm	0,7 mm	0,9 mm
GP539R	50,0 mm	30,0 mm	0,7 mm	0,9 mm
GP511R	10,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	Tiefenstopp 10 mm

Weitere Sägeblätter siehe Prospekt 017599.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDR ist Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Deutschland.

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „Acculan“, „ECCOS“ und „Sterilit“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008240 Stand: 06/2023