


Aesculap Endoscopic Technology

AdTec® needle holder

Simplifiez vous la suture
La facilidad de suturar

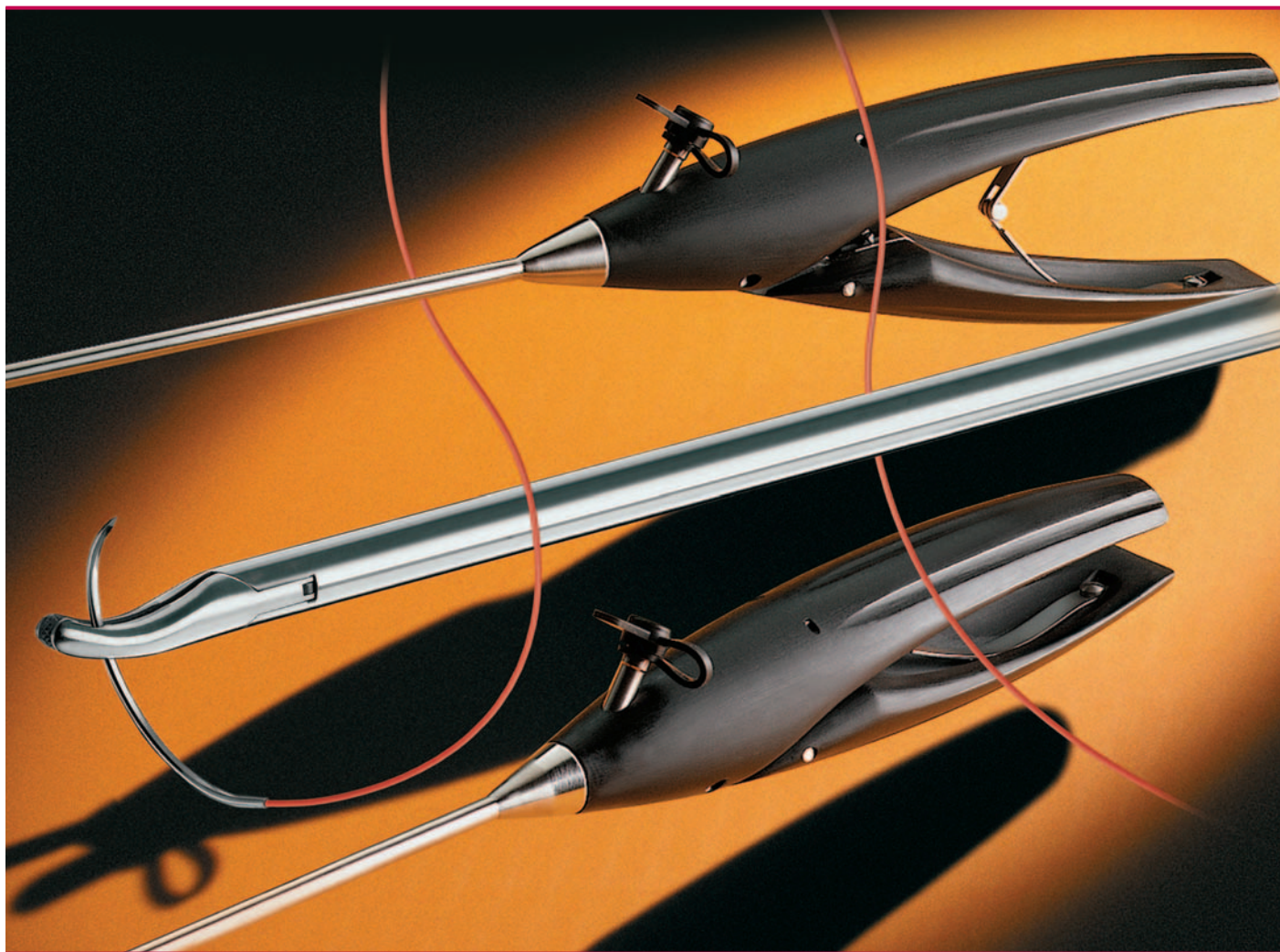

Concept unique de travail offrant ergonomie et force
de préhension

Premiado por la American "Society of Laparoendoscopic
Surgeons SLS"



Nouvelle génération de Porte-Aiguille à poignée axiale. Concept innovant et reconnu par la "Society of Laparoscopic Surgeons"

La nueva generación de porta - agujas Aesculap ha sido premiado por la "Sociedad de Cirujanos Laparoscópicos" con el premio de innovación 2004.





Avec cette nouvelle génération de Porte-Aiguille, Aesculap offre une gamme adaptée à la suture sous coelioscopie. Le concept de poignée axiale permet une rotation aisée de l'instrument, en assurant sécurité et performance du geste.

Aesculap ofrece con los nuevos porta-agujas un instrumento desarrollado especialmente para suturar y hacer nudos. El nuevo mango axial permite que los instrumentos puedan rotarse fácilmente. La variedad de combinaciones de los porta-agujas permiten trabajar con seguridad y eficacia.

- Mors de précision, droit ou courbe. Préhension renforcée sur les aiguilles.
 - Sécurité de préhension même avec les aiguilles les plus fines.
 - Grande facilité d'utilisation grâce au design du porte-aiguille. Le concept de poignée axiale permet une manipulation aisée dans toutes les positions.
 - Fermeture sécurisée et simple du porte-aiguille: 2 positions Ouvert/Fermé par une simple pression sur la crémaillère.
 - Large gamme adaptée à chacun de vos gestes.
 - Excellente durée de vie: Les mors du porte-aiguille sont équipés de plaquettes en carbure de tungstène.
-
- Precisa tracción de agujas rectas y curvas así como una fijación segura de la sutura.
 - Con la protección contra sobrecargas instalado en el instrumento las agujas gruesas así como las de menor grosor se fijan con la misma seguridad.
 - Forma de trabajo ergonómica gracias al mango axial. El instrumento se puede tener en diferentes posiciones gracias a la forma axial del mango.
 - Bloqueo simple con dos posiciones de fijación como el principio de bolígrafo. La aguja puede fijarse en posición abierta o bloqueada.
 - Facilidad de suturar y nudar gracias a la combinación de diferentes instrumentos.
 - Larga vida asegurada gracias a las puntas DUROGRIP con refuerzos de metal duro en la punta.



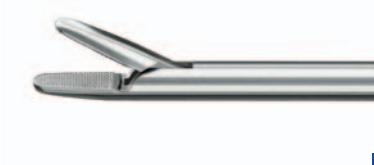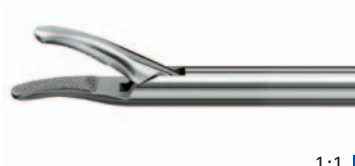

			Référence Número de artículos
DUROGRIP Porte-Aiguille droit Porta-agujas recto	5 mm/310 mm	 1:1	PL407R
	5 mm/370 mm		PL404R
DUROGRIP Porte-Aiguille courbé à gauche Porta-agujas curvo izquierda	5 mm/310 mm	 1:1	PL408R
	5 mm/370 mm		PL405R
DUROGRIP Porte-Aiguille courbé à droite Porta-agujas curvo derecha	5 mm/310 mm	 1:1	PL413R
	5 mm/370 mm		PL415R
DUROGRIP Porte-Aiguille à griffes Porta-agujas Asist., 2 x 3 dientes	5 mm/310 mm	 1:1	PL409R
CROCE/OLMI DUROGRIP Porte-Aiguille fenêtré DUROGRIP Porta-agujas fenestrado	5 mm/310 mm	 1:1	PL410R
CROCE/OLMI DUROGRIP Porte-Aiguille angulé DUROGRIP Porta-agujas acodado	5 mm/310 mm	 1:1	PL411R
DUROGRIP Porte-Aiguille courbé à gauche Porta-agujas curvo izquierda	10 mm/310 mm	 1:1	PL412R



AdTec[®]needle holder



Référence
Número de artículos

Porte-Aiguille, mors crantés
Porta-agujas autodireccional

5 mm/310 mm


PL414R

Porte-Aiguille, mors crantés.

Concept de Porte-Aiguille "redresseur" d'aiguilles:
permet de redresser automatiquement l'aiguille
dans les mors de l'instrument, avec différents axes
de travail possibles.

Porta-agujas autodireccional.

Endereza automáticamente la aguja en distintos
ángulos al vástago del instrumento.

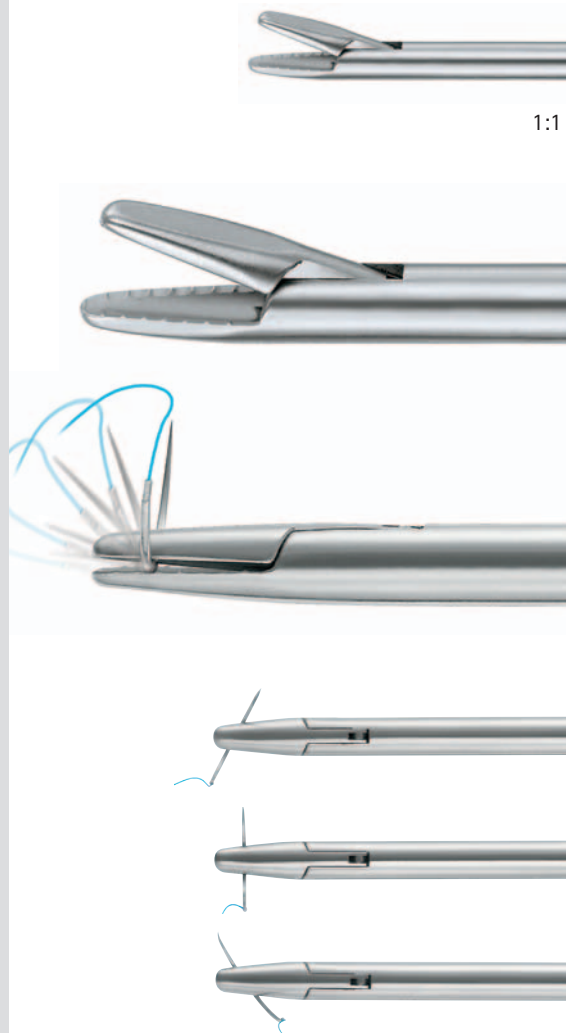

1:1

Autre instrument à poignée axiale

Instrumento adicional con mango similar

Pince à préhension pour
guider l'encliquetage des
agrafeuses circulaires.

10 mm/370 mm

PL406R

Pinza aplic. para contraplaca de
los staplers circ



1:1



AESCULAP®

distribué par:

Belgique

B. Braun Medical N.V./S.A.

Woluwelaan 140b
1831 Diegem
Tél +32 2 7255960
Fax +32 2 7128689

France

B. Braun Medical S.A.

204, avenue du Maréchal Juin
92107 Boulogne Cedex
Tél +33 14 1105300
Fax +33 14 1105240

Suisse

B. Braun Medical AG

Seesatz
6203 Sempach Station
Tél +41 462 6412
Fax +41 462 6482

www.bbraun.ch

distribuido por

España

B. Braun Surgical S. A.

Ctra. Terrassa, 121
08191 Rubí
Teléfono +34 93 5866200
Telefax +34 93 5866268

www.bbraun.com

Sous réserve de modifications techniques. Cette documentation est destinée exclusivement à la présentation ainsi qu'à l'achat et à la vente des produits Aesculap. Toute reproduction même partielle est interdite. En cas d'abus, nous réservons le droit de reprendre les catalogues et les tarifs et de faire valoir nos intérêts.

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas. El presente prospecto puede ser utilizado exclusivamente para ofrecer así como para comprar y vender los productos suministrados por nosotros. Prohibida la reimpresión, ni siquiera en extracto. En caso de uso impropio nos reservamos el derecho de exigir la devolución de los catálogos y de las listas de precios, así como de adoptar medidas en salvaguarda de nuestros intereses.

B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germany

Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de